

Beschreibung SILHOUETTE ist ein HdO-Induktor für die Anwendung an Mobiltelefonen. SILHOUETTE gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen für die Verwendung von einem oder zwei Hörgeräten.


Verwendung Die Benutzer von Hörgeräten haben gewöhnlich Probleme mit Geräuschen und Rückkopplungen, wenn sie mit einem Handy telefonieren. Mit SILHOUETTE kann der Benutzer das Mobiltelefon in der Tasche oder Gürteltasche verwahren, kann Gespräche deutlich hören und muss nie wieder Geräusche und unangenehme Rückkopplungen erfahren.

Funktion SILHOUETTE wird hinter dem Ohr neben dem Hörgerät getragen. Das Hörgerät wird auf „Telefonspule“ (T-Funktion) gestellt. Jetzt kann direkt über das Hörgerät ein klares und unverzerrtes akustisches Signal vom Telefon empfangen werden. Mit der integrierten Fernbedienung* können eingehende Anrufe entgegengenommen oder Gespräche unterbrochen werden. SILHOUETTE ist mit dem passenden Adapter für das Handy des Benutzers ausgerüstet.

Spezifikationen:



Freisprech HdO-Induktor für Mobiltelefone

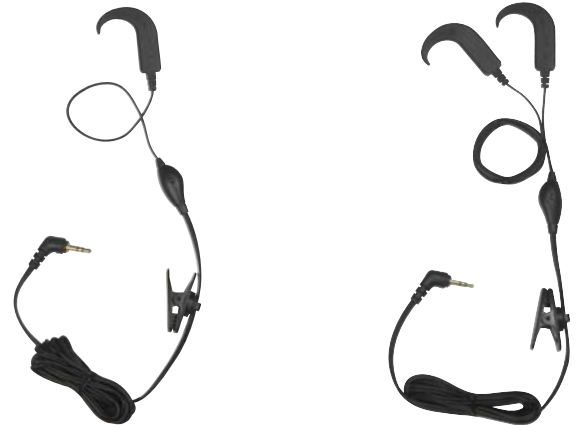

Spezifikationen

Ohrteil

Induktivität	30 mH ± 20 % (1 kHz / 250 mV)
Widerstand	300 Ω ± 20 Ω (Gleichstrom)

Mikrofon

Typ	Elektret-Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Ansprechempfindlichkeit	- 42 dB ± 20 dB
Frequenzbereich	20 Hz to 20 kHz
Impedanz	< 2.2 kΩ
Rauschabstand	> 80 dB

Fernbedienung

Funktion*	kann je nach Handytyp variieren
-----------	---------------------------------

Leitung

length	1000 mm von der Eingangsklinke zum Mikro
Monaural	150 mm vom Mikro zum Ohrteil
Binaural	150 / 430 mm vom Mikro zum Ohrteil
Clip	in der Position verstellbarer Hemdclip

Eingabe / Ausgabe

Typ	vergoldete Klinke, 2,5 mm, 3-polig, (Sockel = Erde; Mitte = Audio; Spitze = Mikrofon)
-----	---

Spezifikationen

Bauart

Größe des Ohrteils (BxHxT)	30 mm x 42 mm x 1 mm/3.5 mm
Gesamtgewicht	15 g / 18 g (monaural / binaural)
Farbe	schwarz
Tragetasche	schwarz (beiliegend)

Material

Ohrteil	PVC und Noryl-Kunststoff
Mikrofon	ABS-Kunststoff und POM-Kunststoff
Leitung	PVC
Hemdclip	POM-Kunststoff




Informationen zu passenden Adaptern finden Sie auf der Rückseite.

Adapter		Artikelnummer		
---------	--	---------------	--	--





Adaptertyp	Handymodell	Einseitiges Modell mit Adapter	Zweiseitiges Modell mit Adapter	Adapter einzeln
------------	-------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------


Nokia

 Adapter N1	1100, 2100, 3210, 3310, 3410, 3510, 3510i, 5510, 6510, 8210, 8310, 8850, 8890, 8910, 8910i	200-04-010-00	200-04-020-00	890-88-110-00
 Adapter N2	2110, 2270, 2285, 3100, 3120, 3200, 3220, 3300, 3570, 3585, 5100, 6020, 6100, 6108, 6170, 6200, 6220, 6230, 6260, 6560, 6610, 6610i, 6630, 6650, 6670, 6800, 6820, 7200, 7210, 7250, 7260, 7270, 7500, 7600, 7610, 7700	200-04-011-00	200-04-021-00	890-88-111-00
 Adapter N3	3285, 5110, 5120, 5125, 5130, 5160, 6110, 6120, 6130, 6150, 6161, 6162, 6185, 6210, 6310, 6340, 6360, 6385, 7110	200-04-012-00	200-04-022-00	890-88-112-00

Siemens

 Adapter SI1	C25, C35, C45, C2588, S25, S2588, ME45	200-04-013-00	200-04-023-00	890-88-113-00
 Adapter SI2	2128, C55, C60, C65, CF62, CX65, M55, M65, MC60, S55, S57, SL55, SL56	200-04-014-00	200-04-024-00	890-88-114-00

Sony Ericsson

 Adapter SE1	A1018, A1228, A2218, A2618, A2628, CF888, I888, LX588, LX700, LX788, P800, P900, R250, R278, R280, R289, R300, R310, R320, R380, R520, S868, SH888, T10, T18, T20, T28, T29, T39, T60, T61, T62, T65, T66, T68, T100, T200, T230, T300, T306, T310, T316, T320, T608, T616, T620, T681, Z200, Z600, Z1010,	200-04-015-00	200-04-025-00	890-88-115-00
---	--	---------------	---------------	---------------

Direktanschluss (ohne Adapter)

Artikelnummer



Nokia

1221, 1260, 1261, 2100, 2260, 2600, 3210, 3290, 3310, 3315, 3330, 3350, 3360, 3361, 3382, 3390, 3395, 3410, 3510, 3520, 3530, 3595, 3610, 3620, 3650, 3660, 3950, 5210, 5510, 6500, 6510, 6560, 6590, 6600, 7650, 8200, 8210, 8250, 8260, 8265, 8270, 8290, 8390, 8850, 8855, 8860, 8890

Einseitiges Modell ohne Adapter

Zweiseitiges Modell ohne Adapter

200-04-001-00

200-04-002-00

Motorola

270C, 280C, 388, 388C, C266, C289, C331, C332, C333, C341, C343, C350, C353, C359, C375, E350, E380, I30, I50, I80, I85, I90C, I205, I500, I530, I550, I700, I730, I830, I860, I930, I990, I2000, P280, P7382, P7389, P8090, P8097, P8167, P8367, P8767, R880, TIMEPORT, T182, T8087, T8090, T8160, T8167, T8192, V60, V66, V70, V120, V290, V300, V303, V680, V690, V730, V860, V868, V878

Samsung

600, 850, 8500, A100, A200, A220, A288, A300, A310, A370, A460, A500, A530s, A600, A620, A650, A790, A800, DB7000, E700, E708, E710, i300, i600, i700, N105, N188, N200, N240, N400, N600, N620, N625, N628, R220, R225, R225M, S100, S105, S508, T100, T108, T400, T408, T500, V200, V206, V208, X108, X458

Auf Nachfrage sind auch andere Adaptertypen erhältlich.